



L415c

家庭用エアマッサージ器

医療機器認証番号
225AHBZX00015000

ドクターメドマー 型式DM-6000

PAT

Dr. MEDOMER®

エアマッサージで、 健康な身体づくり

●両脚セット ●ショートブーツセット ●片腕セット



お好みで選べる 4種類のマッサージモード

- ウェーブモード (もみ上げ)
- ハイパーモード (同時加圧)
- スクイズモード (絞り上げ)
- コースモード (組み合わせ)

電源コードをACインレット化、
ファスナー交換ベルトの採用で
メンテナンス性が大幅UP

**LINEAR**



ビジネス・スポーツ・家事・外出の後の筋肉の疲れを効果的にやわらげます

ソフトな空気力で血行促進マッサージ！ 今日から身体、軽やか爽快！！

抗菌
生地

片腕セット

(本体+アームバンド用ホース+アームバンド)

抗菌
生地

ショートブーツセット

(本体+ショートブーツ用ホース+ショートブーツ)

AC
インレット型
電源コード

抗菌
生地

ガイド表示

ホースを束ねる
位置を表示

ガイド表示
ホースの差し込み
方向を表示

両脚セット


(本体+両脚用ホース+ブーツ)

Automatic Air Massager
Dr. MEDOMER®

DM-6000 PAT

「血液とリンパ液の効果的な流れの促進」をテーマに、使いやすさと理想的な効果の追求から誕生した「ドクターメドマー」。機能性・操作性・耐久性に優れ、しかもコンパクト設計。ゆったりとくつろいだ姿勢で手軽にご利用ください。※体を温めリラックスした状態でご利用いただくと最も効果が得られます。

脚は第二の心臓。歩く度に血液を心臓へ送るポンプです。

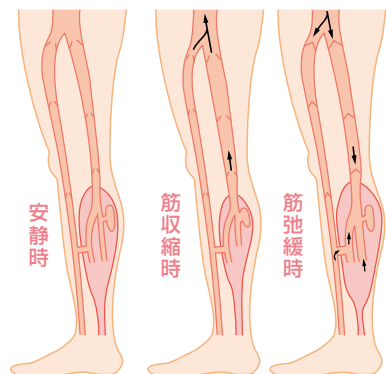


ふくらはぎの筋肉は足先から心臓へと血液を送る役割もしています。

歩く運動は「ふくらはぎ」の筋肉運動で、下半身にたまった静脈血液を心臓に押し上げる作用を促進し、脚の血行を高めます。そして、からだ全体の血行を活発にします。

血行促進が大切な理由


血液は心臓というポンプによってからだの中を循環しています。心臓を中心として送りだされる「血液を運ぶ血管」を**動脈**、反対に心臓にもどる「血液が通る血管」を**静脈**といいます。血液の場合、渋滞が起こり易いのは静脈で、特に太ももから下の脚部は、心臓から遠く、下の方にあるため、一番渋滞が起こりやすい部分なのです。

マッサージは、血液の慢性的渋滞部分ともいべき下肢静脈血の心臓への還流促進にすぐれた効果を発揮します。

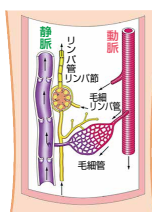

普通の状態

静脈に空気圧を加えて圧縮し、血液の循環を促進させます。

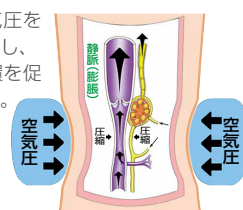

メドマー使用時

効能・効果

- 血行促進
- 疲労回復
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のコリをほぐす
- 神経痛、筋肉痛の
痛みの緩解

特長


- 圧力センサによる制御で、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが行えます。
- 空気袋をオーバーラップさせてあり、もみ残し部位のない効果的なマッサージが行えます。
- すべての操作がスイッチボタンで簡単に行え、手軽にご利用いただけます。
- ソフトな空気圧によるマッサージで、局所的な痛みや電気的な刺激がなく快適です。
- 電源コードをACインレット化して劣化・損傷時の交換を容易にしました。
- ファスナー交換ベルトの採用でファスナー交換を容易にしました。

血行(血流)を阻害しない、最適な加圧 ▶


もみ残し部位のない
オーバーラップ機能 ▶



※気室はイメージです。実際の配置とは異なります。

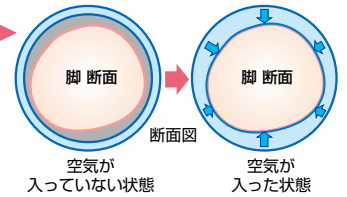

使いやすい操作パネル

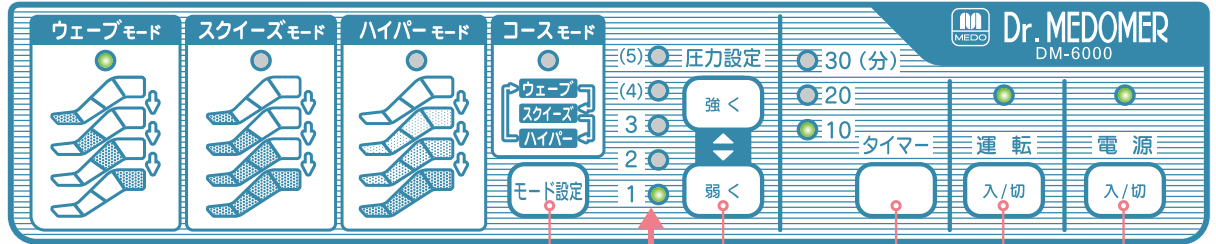

4種類のマッサージパターンが選べます。
「モード設定ボタン」を押すだけで、簡単に4種類のモードを切り換えでき、LEDランプの点灯で選択モードを確認できます。


モード設定ボタン
4種類のマッサージ
モードがお選び
いただけます
設定されたモードには緑色
の表示ランプが点灯します。

圧力設定ボタン
5段階の強弱が
お選びいただけます
安全のため、圧力「4」「5」
はボタンを1秒以上押さな
ければ作動しません。

タイマーボタン
3種類の時間設定を
お選びいただけます

電源入/切ボタン
本機を使用する際、
最初に押してください

運転入/切ボタン
マッサージを始める
際に押してください

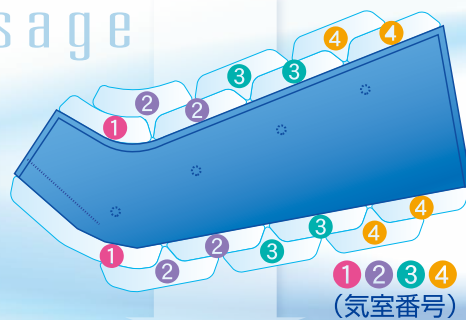

圧力表示 ランプ	気室圧力 kPa (mmHg)				
	ウェーブモード および スクイズモード 1	2	3	4	ハイパーモード 全気室
(5) ●	17.3 (130)	16.0 (120)	14.7 (110)	12.0 (90)	17.3 (130)
(4) ●	14.7 (110)	13.3 (100)	12.0 (90)	10.7 (80)	14.7 (110)
3 ●	12.0 (90)	10.7 (80)	9.3 (70)	9.3 (70)	12.0 (90)
2 ●	9.3 (70)	8.0 (60)	6.7 (50)	5.3 (40)	9.3 (70)
1 ●	4.0 (30)	4.0 (30)	4.0 (30)	4.0 (30)	4.0 (30)

注) 上記圧力は1.3kPa程度のバラツキがあります。

圧力設定ボタンを押すだけで、簡単に圧力調節ができます。

加圧のしくみ

進化したマッサージ機能


4種類の マッサージモード

加圧
排気
血流

ウェーブモード(もみ上げ)




スクイズモード(絞り上げ)

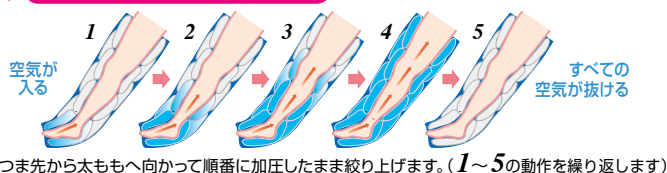

ハイパーモード(同時加圧)




コースモード(3モードの組み合わせ)

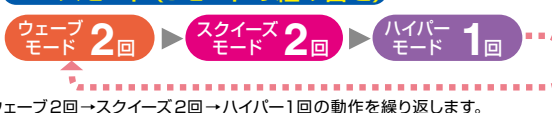

「ウェーブ2回→スクイズ2回→ハイパー1回」の動作を繰り返します。

5段階の圧力設定で
お好みの強弱を
お選びいただけます。

安全のため、圧力「4」「5」は
1秒以上ボタンを押し続け
なければ設定できないよう
になっています。

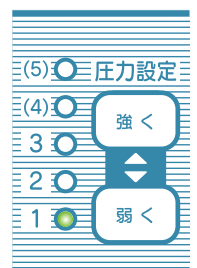

注意

通常、圧力設定は「3」以下で
ご使用ください。特に肌の
弱い方は、圧迫痕が残ること
があります。安全のため、圧力
「4」「5」は1秒以上ボタンを
押し続けなければ設定でき
ないようになっています。

家庭用 エアマッサージ器

ドクターメドマー[®]

医療機器認証番号 225AHBZX00015000

型式 **DM-6000**^{PAT}

類 別: 機械器具77 バイブレーター
(JMDNコード:34663000)

一般名称: 家庭用エアマッサージ器

クラス分類: II (管理医療機器)

特 定 保 守: 非該当

両脚セット



178,000円
+消費税



両脚用ホース

ショートブーツセット



145,000円
+消費税



本体

ショートブーツ

ショートブーツ用
ホース

片腕セット



128,000円
+消費税



本体

アームバンド

アームバンド用ホース

オプション (別売品)

ホース(消耗品)

●両脚用 H-52A
11,000円+消費税

●片脚用 H-50A
6,600円+消費税

●ショートブーツ用 H-53A
11,000円+消費税

●アームバンド用 H-51A
8,000円+消費税

電源コード(消耗品)

●電源コード CAB-100
3,300円+消費税

ファスナー交換ベルト(消耗品)

●ブーツ用
Z-6000
4,070円+消費税

●ショートブーツ用
ZSB-6000
3,850円+消費税

Lサイズベルト(消耗品)

●ブーツ用
Y-50A
4,070円+消費税

●ショートブーツ用
Y-52A
3,850円+消費税

●アームバンド用
Y-51A
3,850円+消費税

ブーツ(消耗品)

●脚用
B-6000
38,500円+消費税

ショートブーツ(消耗品)

●脚用
SB-6000
22,000円+消費税

アームバンド(消耗品)

●腕用
U-6000
30,000円+消費税

〈保証期間〉
お買い上げ日より1年間

※保証対象は本体のみとなります。
([「正常な使用状態」で万一故障が起きた場合に限り。])
※本体以外の付属品及びオプション(別売品)につきましては、
保証期間内であっても保証の対象外とさせていただきます。

▲ 使用上の注意 「ドクターメドマー」を使用する場合、以下の点に注意してください。

警告

●次の人は、本機の使用を禁止します。

1. 医師からマッサージを禁じられている人
(例: 血栓(塞栓)症、重度の動脈硬化(瘤)、急性静脈炎、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)

2. 発症後6ヶ月以内の下肢深部静脈血栓症を患っているか、もしくはその恐れのある場合。
※「下肢深部静脈血栓症」とは、下肢全体または膝より下が腫れ上がって痛みがあり、
立ったり歩いたりすると痛みが強くなる自覚症状のあることをいいます。

3. 装着部におでき、やけど、虫さされなどの急性炎症や化膿性疾患がある場合。

●本機の改造、分解、修理は絶対にしないでください。事故の原因になります。

注意

●次の人は必ず医師と相談のうえ使用してください。症状や病因によっては使用に適さない場合があります。

1. ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい
体内植込み型医用電気機器を使用している人

2. 心臓に障害がある人

3. 高血圧症と診断されている人

4. 悪性しゅよう(腫瘍)のある人

5. 糖尿病の人

6. 体温38℃以上(有熱期)の人

●通常、圧力設定は「3」以下でご利用ください。特に肌の弱い方は、圧迫痕が残ることがあります。

7. 骨折しゅう(軽)症の人、せきつい(脊椎)の
骨折、急性(とう)痛(痛性)疾患の人

8. 妊娠初期の不安定期または、出産直後の人

9. 安静を必要とする人

10. 特に身体に異常を感じている人

11. 皮膚の弱い人

12. 治療部位に疾患から生じるむくみや疼痛のある人

13. 治療部位に骨折、脱臼、肉はなれ、ねんざ、
創傷のある人

14. 上記以外の疾患で医師の治療を受けている人

15. 自覚症状の意思表示ができない人

16. 本機の使用によりかえって疼痛が増す人

17. 本機を使用しても症状の改善が見られない人

18. 腫瘍のある人(アームバンド使用時に限る)

取扱い販売店

技術で、人を想う。

日東工器株式会社

メド事業部

リニア販売部

〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4

Tel: 03-5748-5521 / Fax: 03-3754-0258

ホームページ

www.nitto-kohki.co.jp



フリーコール

●お客様相談窓口(土・日・祝日を除く)

受付時間 AM8:30~PM5:15

0120-210-216



ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず
「取扱説明書」または「注意書」をよくお読みください。

このカタログの記載内容は2018年3月現在のものです。
改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。



JQA-2025
JQA-EM4057
本社/研究所

18CNet06-①